

麻酔及び呼吸機器

円錐コネクター・ソケット試験用ゲージ




臨床での麻酔回路や呼吸回路の適切な組み立てには、マスク、コネクター、チューブ等の接合部の互換性が必要です。接合部試験用ゲージは、各器具の製造や検査工程、医療機関の受入検査に使用されています。


特徴

- ISO 5356-1 (JIS T 7201-1)に基づいたゲージで、テーパ部の合否判定に使用。
- ISOの要求事項「円錐接合が安全に保持されていながらも、操作者が連結を外せるかみ合わせである」を正確にチェック。
- 高度なラッピング技術を施したテーパゲージが、連結する医療器具の品質と精度を保証。

使用例 (金属以外の材料で作られた円錐コネクタ・ソケット用試験ゲージ)

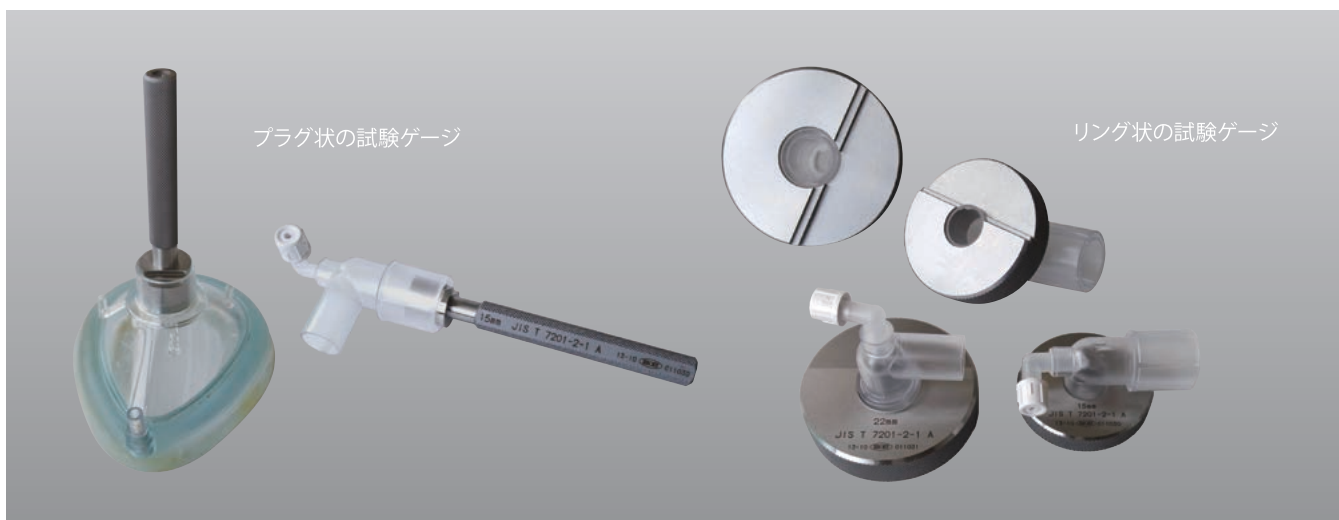

試験ゲージの寸法

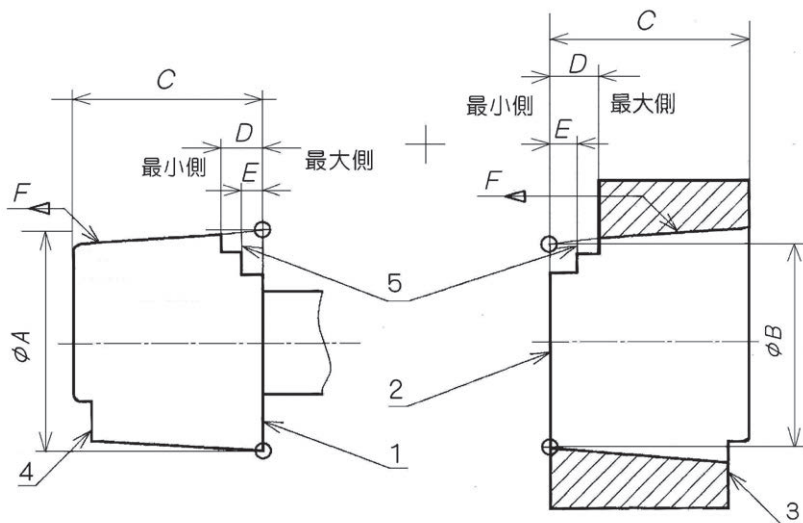

1. A 面
2. B 面
3. 合致すべきゲージが、A 面で正確に合うことを点検するための段差
4. 合致すべきゲージが、B 面で正確に合うことを点検するための段差
5. 基準段差

仕様

コネクタサイズ	A	B	C	D	E	F	単位長に対する直径上のテーパ許容差(mm)
	mm	mm	mm	mm	mm	テーパ率	
15mm	15.525±0.005	15.165±0.005	14.5±0.005	4.3±0.005	2.2±0.005	1 : 40	0.025±0.0002
22mm	22.425±0.005	21.94±0.005	19.5±0.005	5.2±0.005	2.2±0.005	1 : 40	0.025±0.0002
30mm	39.98±0.005	30.12±0.005	15.0±0.005	3.1±0.005	1.6±0.005	1 : 20	0.050±0.0002

株式会社 第一測範製作所

DAI-ICHI SOKUHAN WORKS CO.

URL <http://www.issoku.jp> E-mail info@issoku.jp



ISO 14001 認証
JQA-EM4941
本社工場



ISO 9001 認証
JQA-Q2223

※ 品質活動部門
・検査工程・検査工程及び
検査工程の ISO 9001 認証
部門・製法・検査工程の
承認・検査工程の設計・開発
及び製造

本社・工場
〒947-0044 新潟県小千谷市大字坪野 826 番地 2
TEL(0258)84-3911(代) FAX(0258)81-2113
ホールねじ事業部 TEL(0258)81-2111(代) FAX(0258)81-2112
海外営業課 TEL(0258)84-3922(代) FAX(0258)81-2113
本社営業所 TEL(0258)84-3916 FAX(0258)81-2113
東京営業所 〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目13番地12号M&Mビル7階
TEL(03)5812-6722(代) FAX(03)5812-6725

大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町2丁目5番地28号コスモ西本町ビル4階
TEL(06)6533-3296(代) FAX(06)6537-2030
名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山2丁目14番地1号司ビル3階
TEL(052)331-8521(代) FAX(052)339-1010
北陸営業所 〒930-0034 富山市清水元町1番18号桑島ビル1階
TEL(076)423-5335(代) FAX(076)494-2202

注:本カタログは改良のため、予告なしに外觀・仕様などを変更することがあります。