

注射器 医療器 検査用ゲージ

Gauges for 6% (Luer) Taper on Medical Equipment

注射器・医用機器のジョイント テーパ部検査用ゲージ

ISO規格を満たし、
使い勝手を向上した新設計



- ・ゲージメーカーゆえの高精度な寸法管理
- ・耐食性を考慮した材料を使用
- ・ISO594-1に基づいたゲージは、6%(Luer)テーパ部寸法の合否判定に使用
- ・ISO594-2に基づいたゲージは、同規格に定められた漏れ、分離力、外しトルク、組立易さ、乗り上げ抵抗、応力き裂試験に使用
- ・漏れ試験に使用するゲージには、エアーチューブ取付用の継手を付属

■ルアーテーパを利用している注射器



ルアーテーパ(luer taper) は、国際的に使用されている接続方法のひとつで、オスルアー (male luer) と、メスルアー (female luer) の2種類があります。差し込むだけで簡単に気密性のよい接続が可能で、注射器をはじめ、医療機器、理化学器具を中心に広く採用されています。

接続口は直径約4mmの円形で、6/100 のテーパを持ち、詳細は「ISO594」で規定されています。

■注射器用ゲージ ISO594-1



plug gauge



ring gauge

■医療器用ゲージ ISO594-2



Fig. 5



Fig. 6

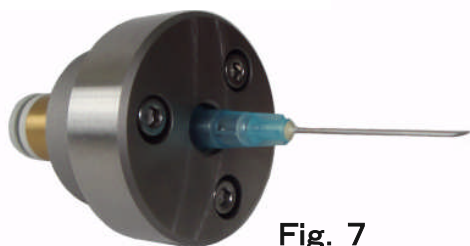


Fig. 7



Fig. 8

株式会社 **第一測範製作所**

DAI-ICHI SOKUHAN WORKS CO.

URL <http://www.issoku.jp> E-mail info@issoku.jp



ISO14001認証
JQA-EM4941
本社工場

本社・工場
〒947-0044 新潟県小千谷市大字坪野826番地2
TEL (0258) 84-3911 (代) FAX (0258) 81-2113

ポールナジ事業部 TEL (0258) 81-2111 (代) FAX (0258) 81-2112
海外営業課 TEL (0258) 84-3922 (代) FAX (0258) 81-2113
本社営業所 TEL (0258) 84-3916 FAX (0258) 81-2113
東京営業所 〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目13番12号M&Mビル7階
TEL (03) 5812-6722 (代) FAX (03) 5812-6725

名古屋営業所
大阪営業所
北陸営業所
九州営業所

〒460-0022 名古屋市中区金、山2丁目14番1号司ビル3階
TEL (052) 331-8521 (代) FAX (052) 339-1010
〒550-0005 大阪市西区西本町2丁目5番28号コスモ西本前ビル4階
TEL (06) 6533-3296 (代) FAX (06) 6537-2030
〒930-0034 富山市清水元町1番18号桑島ビル1階
TEL (076) 423-5335 (代) FAX (076) 494-2202
〒810-0064 福岡市中央区地行4丁目3番13号アルハイム地行101号室
TEL (092) 739-7160 (代) FAX (092) 739-7161

注:本カタログは改良のため、予告なしに外観・仕様などを変更することがあります。(2011年5月現在)